



BLT4, SS 2026

Isolation von genomischer DNA

Konzentrations- und Längenbestimmung von
verschiedenen Proben

Mitwirkende

Tim Peko

Nathalie Sonnleitner

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Zielsetzung	3
1.1	Zielsetzung	3
2	Theoretischer Hintergrund und Referenzwerte	4
2.1	Genomarchitektur und Unterschiede zwischen Proben	4
2.2	Photometrie	4
2.3	Referenzwerte	6
2.4	Gelelektrophorese	6
2.5	Typ-II-Restriktionsenzyme	7
3	Klinische Relevanz	9
4	Materialien	10
5	Durchführung	12
5.1	Sicherheitshinweise	12
5.2	Zellaufschluss	12
5.3	Reinigung	13
5.4	Isolierung durch Fällung	13
5.5	Hinzugabe von RNase	14
5.6	Photometermessung	14
5.7	Restriktionsenzym-Verdau	15
5.8	Gelelektrophorese	15
6	Ergebnisse	16
6.1	Leberproben	16
6.1.1	Isolierung und Photometrie	16
6.1.2	RNase-Nachweis	17
6.1.3	Restriktionsverdau	18
6.2	Bakterienproben	19
6.2.1	Isolierung und Photometrie	19
6.2.2	RNase und Restriktion	20
6.3	Quantitative Auswertung	22
6.3.1	Statistische Auswertung	22
6.3.2	Hypothesentests	23
7	Diskussion	25
7.1	Gesamtinterpretation	25
7.2	Fehlerquellen	26
7.2.1	Probenvorbereitung	26
7.2.2	Lyse und Extraktion	26
7.2.3	Reinigung und Aufreinigung	26
7.2.4	RNase-Behandlung und Photometrie	26
7.2.5	Restriktionsverdau und Gelelektrophorese	26
7.2.6	Statistik	26
Anhang		27
	Rohdaten und Versuchsangabe	27
	Quellen	27
	Abbildungsverzeichnis	28
	Tabellenverzeichnis	29

1 Einleitung und Zielsetzung

In der BLT4-Übung **Isolation von genomischer DNA** wurde die Extraktion genomischer DNA (gDNA) aus zwei unterschiedlichen Ausgangsmaterialien durchgeführt: aus Schweineleber als eukaryotischem Gewebe und aus **E. coli**-Kulturen als prokaryotischem Modellorganismus. Die isolierten Proben wurden anschließend hinsichtlich Reinheit und Konzentration photometrisch charakterisiert, der RNA-Abbau durch RNase-Behandlung nachgewiesen und die Integrität der DNA mittels Restriktionsenzym-Verdau sowie Gelelektrophorese beurteilt. Die methodische Grundlage bildet die Angabe zur Isolierung genomischer DNA (Abschnitt 5.1).

1.1 Zielsetzung

Die Ziele des protokollierten Experiments können wie folgt zusammengefasst werden:

1. **Isolierung** (→ Abschnitt 6.1.1, Abschnitt 6.2.1): Extraktion genomischer DNA aus Schweineleber und **E. coli**-Kulturen. Erfolgskriterium: sichtbare Hochmolekular-DNA im Agarosegel bzw. messbare Absorption bei 260 nm.
2. **RNase-Verdau** (→ Abschnitt 6.1.2, Abschnitt 6.2.2): Nachweis des RNA-Abbaus durch RNase mittels Photometrie und Gelelektrophorese. Erwartung: Abnahme der RNA-Kontamination (untere Gel-Wolke, erhöhte E_{260} bei *-RNase*).
3. **Konzentrationsbestimmung** (→ Abschnitt 6.1.1, Abschnitt 6.3.1): Photometrische Bestimmung der DNA-Konzentration und Reinheit. Referenzwerte: $E_{260}/E_{280} \approx 1.8$, $E_{260}/E_{230} \in 2.0 - 2.2$.
4. **Restriktionsenzym-Verdau** (→ Abschnitt 6.1.3, Abschnitt 6.2.2): Einsatz von Typ-II-Restriktionsenzymen zur Beurteilung der DNA-Qualität. Erfolgskriterium: Umwandlung der Hochmolekular-Bande in einen durchgehenden Schmierstreifen.

2 Theoretischer Hintergrund und Referenzwerte

2.1 Genomarchitektur und Unterschiede zwischen Proben

Wie die DNA-Extraktion abläuft, hängt davon ab, ob man mit tierischen oder bakteriellen Zellen arbeitet. Die genomische DNA (gDNA) findet man in der Zelle nicht einfach frei schwimmend, sondern sie ist mit Proteinen verbunden und von Zellhüllen umgeben. (Bruce Alberts, 2015)

- **Eukaryotische DNA (Schweineleber):** Das Genom der Schweineleberzellen (etwa 2,8 Milliarden Basenpaare, 38 Chromosomen) ist stark gepackt, weil es um spezielle, positiv geladene Proteine (Histone) gewickelt ist, wodurch Chromatin entsteht. (Bruce Alberts, 2015) Außerdem enthalten Leberzellen sehr viel RNA, vor allem rRNA und mRNA. Aufgrund der hohen Stoffwechselaktivität kann der Anteil bis zu 80-90 % der Nukleinsäuren ausmachen. (Harvey Lodish et al., 2016) Deshalb braucht man proteinabbauende Enzyme wie Proteinase K, um die Histone zu entfernen. Für den Abbau der RNA gibt man RNase dazu. Eine zu erwartende Ausbeute beträgt 3-4 mg DNA pro Gramm Leber. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)
- **Prokaryotische DNA (E. coli):** Bei Bakterien wie E. coli liegt die DNA als ein ringförmiges Chromosom mit rund 4,6 Millionen Basenpaaren ohne Histone vor und ist durch Supercoiling kompakter gemacht. (Michael T. Madigan et al., 2020) Das größte Problem bei der Extraktion ist die Zellwand. E. coli besitzt als gramnegatives Bakterium eine dicke äußere Schicht aus Lipopolysacchariden (LPS), die das Enzym Lysozym daran hindern kann, die Zellwand aufzubrechen. Erst wenn diese äußere Schicht zum Beispiel mit Hilfe von EDTA gestört wird, kann die darunterliegende Mureinschicht angreifbar werden. Bleibt sie intakt, klappt die Lyse nicht und es kann keine DNA extrahiert werden. (Thomas J. Silhavy et al., 2010)

2.2 Photometrie

$$(1) \quad E_{\lambda} = \sum_{i=1}^n \epsilon_{i,\lambda} \cdot c_i \cdot \underset{1\text{cm}}{d}$$

Gleichung 1 zeigt die Beziehung zwischen der Extinktion E_{λ} bei einer bestimmten Wellenlänge λ und der Konzentration c_i der n verschiedenen Komponenten indiziert mit i . Die Extinktionskoeffizienten $\epsilon_{i,\lambda}$ sind spezifisch für jede Komponente und Wellenlänge. (Molar extinction coefficient - Wikipedia, o. J.)

Bei doppelsträngiger DNA gilt der lineare Zusammenhang $E_{260} = 1.0 \Rightarrow \text{dsDNA} = 50 \mu\text{g/ml}$ bei einer Küvettenlichtweg von $d = 1 \text{ cm}$. (Martin Armbrrecht, 2013) Daraus folgt für die Konzentrationsberechnung bei bekannter Verdünnung:

$$(2) \quad c_{\text{DNA}} = E_{260} \cdot 50 \mu\text{g/ml} \cdot \text{Verdünnungsfaktor}$$

Die Reinheitsquotienten werden als Extinktionsverhältnisse berechnet:

$$(3) \quad E_{260}/E_{280} = \frac{E_{260}}{E_{280}}$$

(4)

$$E_{260}/E_{230} = \frac{E_{260}}{E_{230}}$$

Gleichung 2, Gleichung 3 und Gleichung 4 werden für die Auswertung der Photometriemessungen herangezogen. Im Experiment wurde eine Verdünnung von 1:100 verwendet, sodass der Verdünnungsfaktor 100 beträgt.

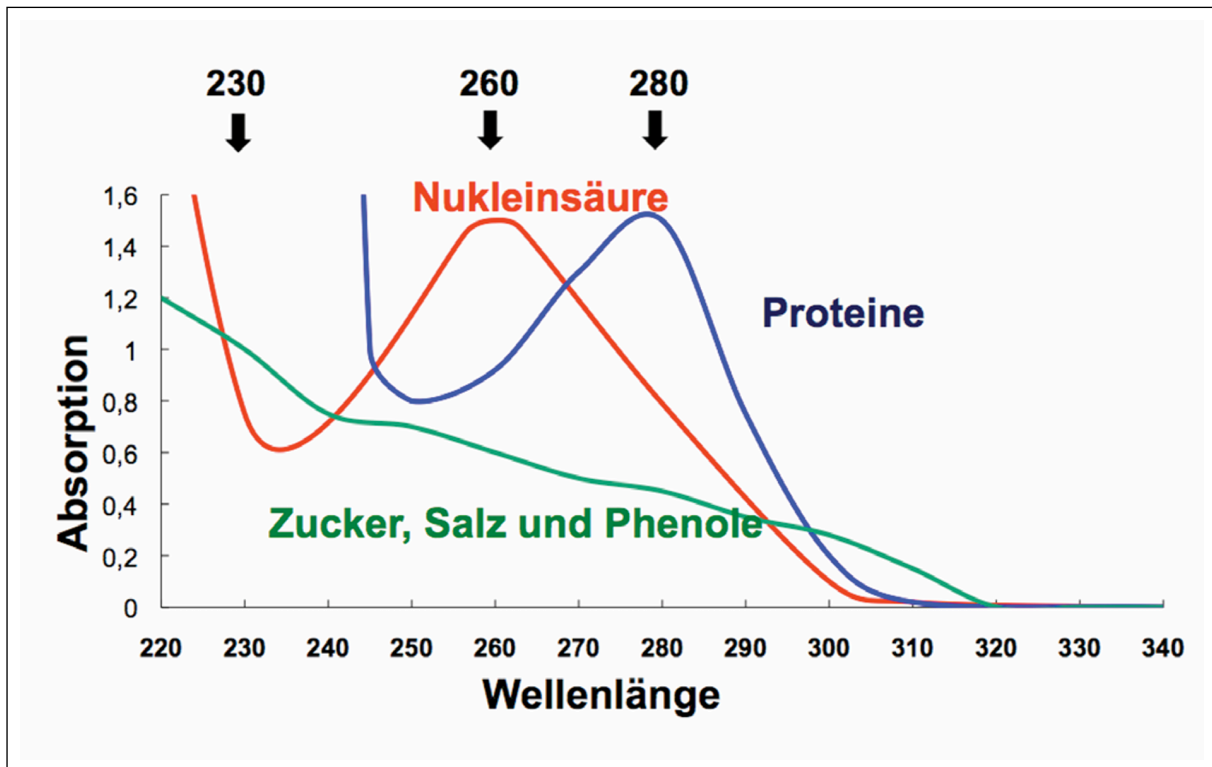


Abbildung 1: Spektrum von Nukleinsäuren und üblichen Verunreinigungen. (Martin Armbrecht, 2013)

Abbildung 1 zeigt ein illustratives Spektrum der verschiedenen üblichen Komponenten einer isolierten Nukleinsäureprobe. Dabei lassen sich wichtige Quotienten zur Beurteilung der Reinheit der Probe formulieren:

Der 260/280-Quotient (Protein-Kontamination)

Dieser Quotient ist der Standardwert zur Überprüfung der DNA- und RNA-Reinheit gegenüber Proteinen. Ein Verhältnis von etwa 1,8 wird allgemein als Indikator für reine DNA akzeptiert. Abweichende, niedrigere 260/280-Verhältnisse weisen in der Regel darauf hin, dass die Probe entweder durch Proteine oder durch Reagenzien wie Phenol verunreinigt ist. (Brian Matlock, 2015)

Da DNA bei 260 nm im Vergleich zu Proteinen bei 280 nm extrem stark absorbiert, kann selbst eine Probe mit einem akzeptablen 260/280-Wert noch erhebliche Mengen an Proteinverunreinigungen enthalten, bevor der Quotient massiv abfällt. (Brian Matlock, 2015)

Der 260/230-Quotient (Salze und organische Lösungsmittel)

Dieser Wert dient als sekundäres Maß für die Reinheit von Nukleinsäuren und reagiert sensibel auf Rückstände aus den Extraktionspuffern. Für reine Nukleinsäuren werden allgemein 260/230-Werte im Bereich von 2,0 bis 2,2 erwartet. Der 260/230-Quotient wird verwendet, um die Anwesenheit unerwünschter organischer Verbindungen wie Phenol, Guanidinhydrochlorid und Guanidinthiocyanat anzuzeigen. Verunreinigungen durch diese Chemikalien zeigen eine

starke Absorption bei 230 nm oder darunter, was den 260/230-Quotienten drastisch senkt. (Brian Matlock, 2015)

Substanz	ϵ bei 230 nm	ϵ bei 260 nm	ϵ bei 280 nm
dsDNA	$\approx 10,0$	20,0	$\approx 11,1$
Proteine (BSA)	$\approx 2,0$ bis 3,0	$\approx 0,4$	0,66
Phenol	sehr hoch	$\approx 15,0$	$\approx 12,5$

Tabelle 1: Extinktionskoeffizienten (ϵ) von dsDNA, Proteinen und Phenol bei den für die Reinheitsbeurteilung relevanten Wellenlängen. (Brian Matlock, 2015)

2.3 Referenzwerte

Parameter	Referenzwert	Quelle
DNA-Ausbeute (Leber)	3-4 mg/g Gewebe	Michael R. Green & Joseph Sambrook (2018)
E. coli -Chromosom	$\approx 4,6$ Mbp, ringförmig	Michael T. Madigan et al. (2020)
E_{260}/E_{280} (reine DNA)	$\approx 1,8$	Brian Matlock (2015)
E_{260}/E_{230} (reine DNA)	2,0-2,2	Brian Matlock (2015)
Konzentration aus Photometrie	$E_{260} = 1.0 \Rightarrow 50\mu\text{g/ml}$ (1 cm)	Martin Armbrrecht (2013)
Gel unrestrictiert	Band >20 kbp am Gelanfang	Theorie, Abschnitt 2.1
Gel restr.-verdaut	durchgehender Schmierstreifen	Abschnitt 2.5

Tabelle 2: Zusammenfassung der für die Beurteilung der Versuchsergebnisse herangezogenen Referenzwerte.

2.4 Gelelektrophorese

Die Gelelektrophorese ist eine zentrale Methode zur Trennung und Analyse von DNA-Fragmenten. Grundlage dieses Verfahrens ist, dass DNA aufgrund ihrer negativ geladenen Phosphatgruppen in einem elektrischen Feld wandert. Durch das Gel (meist aus Agarose) werden die DNA-Fragmente unterschiedlich stark aufgehalten. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

Meist wird die Probe mit einem Färbemittel angereichert, das unter UV-Licht deutlich sichtbar wird und so Bandenmuster entstehen lassen. Im Fall von Ethidiumbromid korreliert die Leuchtkraft mit der Masse der DNA-Fragmente. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

Der Trennmechanismus (Siebeffekt)

Da die Ladung der DNA proportional zu ihrer Länge (Anzahl der Basenpaare) zunimmt, ist das Verhältnis von Ladung zu Masse für alle DNA-Moleküle konstant. Würden sie im freien Wasser wandern, wären alle DNA-Stücke gleich schnell. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

Agarose ist ein Polysaccharid, das beim Abkühlen ein dreidimensionales Porennetzwerk bildet. Während die DNA zur Anode wandert, zwingt sie sich durch dieses Gel-Netzwerk. Dabei wirkt eine Reibungskraft, die der elektrischen Kraft entgegenwirkt:

- **Kleine DNA-Fragmente** schlüpfen leicht durch die Poren und wandern sehr schnell.

- **Große DNA-Fragmente** bleiben in den Poren hängen, verheddern sich und wandern sehr langsam. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

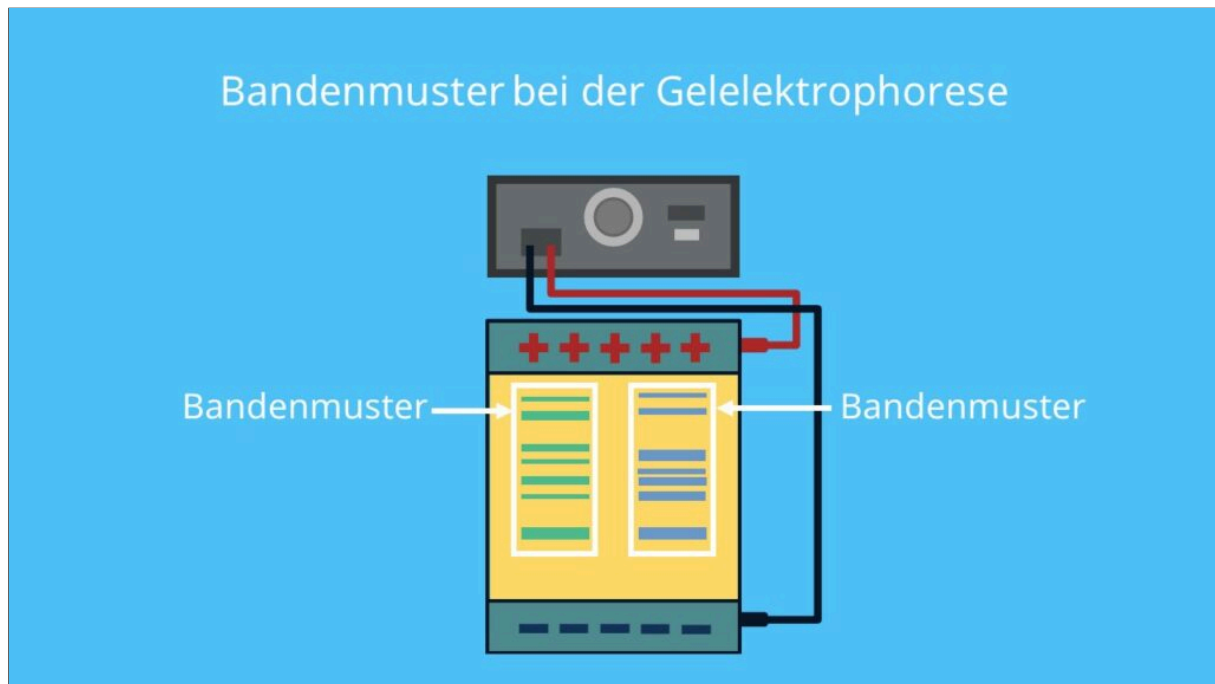


Abbildung 2: Bandenmuster bei der Gelelektrophorese. (Gelelektrophorese, o. J.)

Dieser „Siebeffekt“ sorgt dafür, dass die DNA-Moleküle logarithmisch, wie in Abbildung 2 zu sehen, nach ihrer Größe sortiert werden. Ein Abstand zwischen 1000 bp und 2000 bp ist viel größer als der Abstand zwischen 10000 bp und 11000 bp. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

2.5 Typ-II-Restriktionsenzyme

Ursprünglich entwickelten Bakterien Restriktionsenzyme zur Abwehr von eindringender Virus-DNA. Heute sind sie für das Labor äußerst wertvoll, weil sie zwei praktische Eigenschaften besitzen, die in Typ-I- oder Typ-III-Enzymen so nicht vorhanden sind: (Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

1. **Erkennung:** Bindung an spezifische DNA-Sequenzen, meist 4-8 Basenpaare lang. Meistens handelt es sich um Palindromstrukturen¹. EcoRI: 5'-GAATTC-3' $\rightarrow$ 3'-CTTAAG-5'

↗
Gegenstrang
2. **Schnitt:** Die DNA wird zuverlässig innerhalb oder unmittelbar neben der Erkennungssequenz geschnitten.

(Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

¹Am Gegenstrang in 5' → 3' Richtung gleich

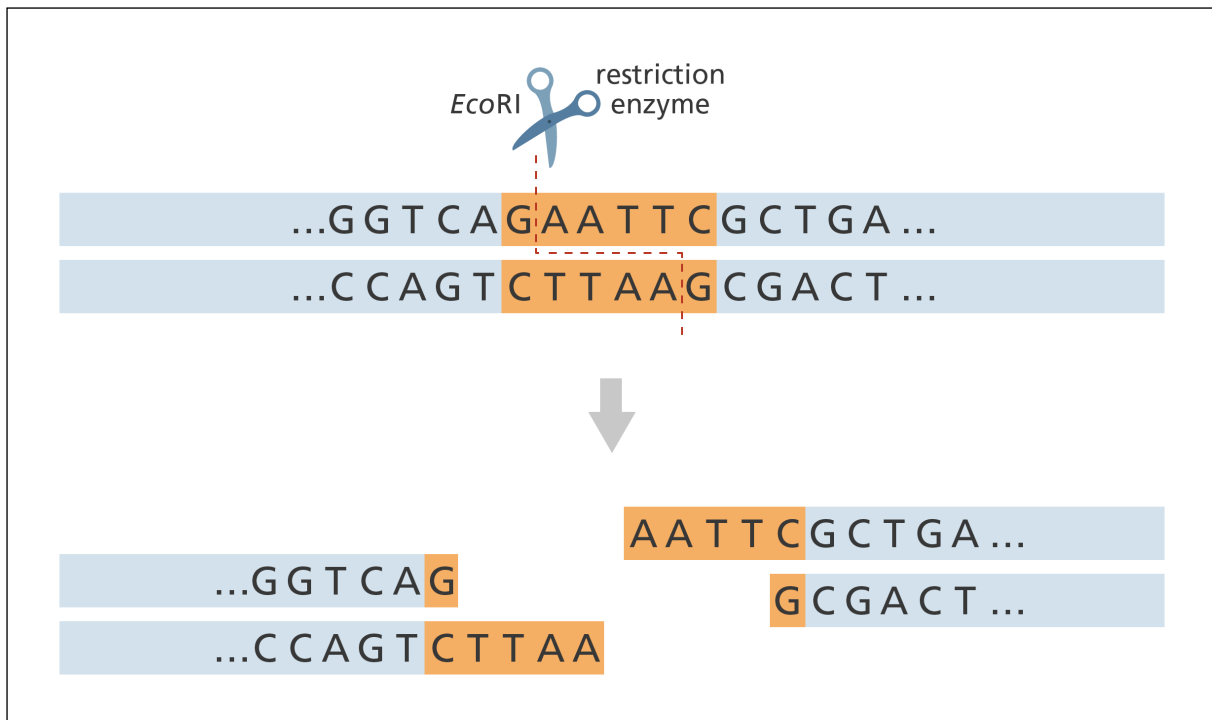


Abbildung 3: DNA kann mit molekularen „Scheren“, den Restriktionsenzymen, an definierten Stellen zerschnitten werden. Orange markiert ist die Stelle, welche von genau diesem Restriktionsenzym (es hat den Namen EcoRI) erkannt wird. (Restriction enzyme (CC BY-NC-SA 2.0), 2016)

In Abbildung 3 werden zwei *Sticky Ends* erzeugt. Die dadurch entstehenden, einzelsträngigen Überhänge erleichtern aufgrund der Wasserstoffbrückenbindungen die Verknüpfung mit anderen komplementären DNA-Strängen. *Blunt Ends* besitzen diese Übergänge nicht und entstehen durch Schneiden in der Mitte der Erkennungssequenz. (Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

3 Klinische Relevanz

Die Qualität isolierter genomischer DNA ist eine zentrale Voraussetzung für nahezu alle molekularbiologischen und klinisch-diagnostischen Anwendungen. Während für Standard-PCR-Anwendungen oft einfache Extrakte ausreichen, erfordern moderne Hochdurchsatz-Verfahren wie Next-Generation Sequencing (NGS), Whole-Genome-Sequencing oder klinische Gentests hochmolekulare und extrem reine gDNA. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)

Klinische und diagnostische Anwendungen:

- **PCR und qPCR:** Verunreinigungen durch Proteine, Phenol oder EDTA hemmen die Taq-Polymerase und verfälschen Amplifikationsergebnisse.
- **Next-Generation Sequencing:** RNA-Reste führen zu fehlerhaften Reads und erschweren die Genom-Assemblierung; Salz- und Phenol-Kontaminationen inhibieren Sequenzierpolymerasen.
- **Forensische Genetik und Identitätsprüfung:** Die Integrität der DNA (Fragmentlänge) bestimmt, ob STR-Analysen oder SNP-Typisierungen erfolgreich sind.
- **Pharmakogenomik:** Patientenspezifische Genotypisierungen (z. B. CYP450-Varianten) setzen reproduzierbar reine Ausgangsmaterialien voraus.

Bezug zu den im Experiment gemessenen Parametern: Die im Versuch bestimmten Reinheitsquotienten (E_{260}/E_{280} , E_{260}/E_{230}) und die Sichtbarkeit intakter Hochmolekular-DNA im Gel sind direkte Qualitätsindikatoren, die in klinischen und Forschungslaboren routinemäßig vor kostenintensiven Downstream-Anwendungen geprüft werden. Verunreinigungen durch Proteine oder Phenole/Salze (siehe Abschnitt 2.2) hemmen die empfindlichen Polymerasen der Sequenziergeräte, während RNA-Reste zu fehlerhaften Daten bei der Genom-Assemblierung führen können. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)

4 Materialien

Für die Durchführung des Experiments gemäß der Angabe zur Isolierung genomischer DNA wurden folgende Materialien verwendet:

Probematerial:

- Frische **Schweineleber** (ca. 3,5–4,5 g pro Ansatz, siehe Tabelle 3)
- Übernacht-**E. coli**-Kultur in LB-Medium

Reagenzien für Lyse und Reinigung:

- Lysis-Puffer (mit Detergens zur Membranauflösung)
- **Lysozym** (für bakterielle Zellwände)
- **Proteinase K** (für eukaryotisches Gewebe)
- **EDTA** (Komplexbildner, Störung der gramnegativen Außermembran)
- **Phenol** (pH 8,0)
- **Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol** (25:24:1)
- **Chloroform**
- **Natriumacetat** (3 M, pH 5,2)
- **Ethanol** (100 % und 70 %)
- **TE-Puffer** (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0)

Enzyme:

- **RNase A** (RNA-Abbau)
- Restriktionsenzyme **EcoRI**, **NaeI**, **PstI** mit jeweiligem Standard-Reaktionspuffer (NEB)

Analytik und Gelelektrophorese:

- UV-Photometer mit 1-cm-Küvetten
- Destilliertes Wasser (Null-Referenz)
- **Agarose**
- **Ethidiumbromid** (oder äquivalentes DNA-Färbemittel)
- DNA-Ladder **GeneRuler™ 1 kb Plus**
- TAE- oder TBE-Laufpuffer
- DNA-Ladepuffer mit Tracking-Dye

Geräte und Verbrauchsmaterial:

- Wasserbad (37 °C und 56 °C)
- Kühlzentrifuge mit Eppendorf-Adaptern
- Pipetten und Filterspitzen
- 1,5-ml- und 2-ml-Reaktionsgefäße
- Agarose-Gelelektrophorese-Apparat mit UV-Transilluminator
- Sterile Skalpellklingen und Petrischalen (Gewebehomogenisierung)

Name	Kürzel	Gewicht [g]
Leonie Simon	LS	3.92
Tim Peko	TP	3.48
Nathalie Sonnleitner	NS	4.04
Samuel Süß	SS	3.71
Sebastian Größwang	SG	4.43

Tabelle 3: Gewichte der verwendeten Leberproben vor der Extraktion [g].

Enzym	Alt	Neu
EcoRI	NS	TP
NaeI	X	SS
PstI	LS	SG
HindIII	X	CB
XbaI	AL	X
AluI	EL	X

Tabelle 4: Bekannte Zuteilung der Proben zu den Restriktionsenzymen. L = Leber, B = Bakterien.

Enzym	Erkennungssequenz
EcoRI	
NaeI	
PstI	

Tabelle 5: Erkennungssequenzen der verwendeten Restriktionsenzyme: EcoRI, NaeI, PstI. Bildquelle: <https://www.neb.com/>

5 Durchführung

Nachfolgend wird die im Labor durchgeführte Vorgehensweise Schritt für Schritt erläutert. Die Durchführung basiert auf den Angaben im Anhang (Rohdaten und Versuchsangabe).

5.1 Sicherheitshinweise

- **Phenol und Chloroform:** Stark ätzend und toxisch. Nur unter dem Fume Hood arbeiten, Schutzhandschuhe und Laborkittel tragen. Hautkontakt sofort mit Wasser spülen. Phenol verursacht schwere Verbrennungen.
- **Ethidiumbromid:** Mutagen. Handschuhe tragen, Gelabfälle in Sammelbehälter entsorgen.
- **Biologisches Material:** Leber und Bakterienkulturen als potenziell infektiöses Material behandeln.

5.2 Zellaufschluss

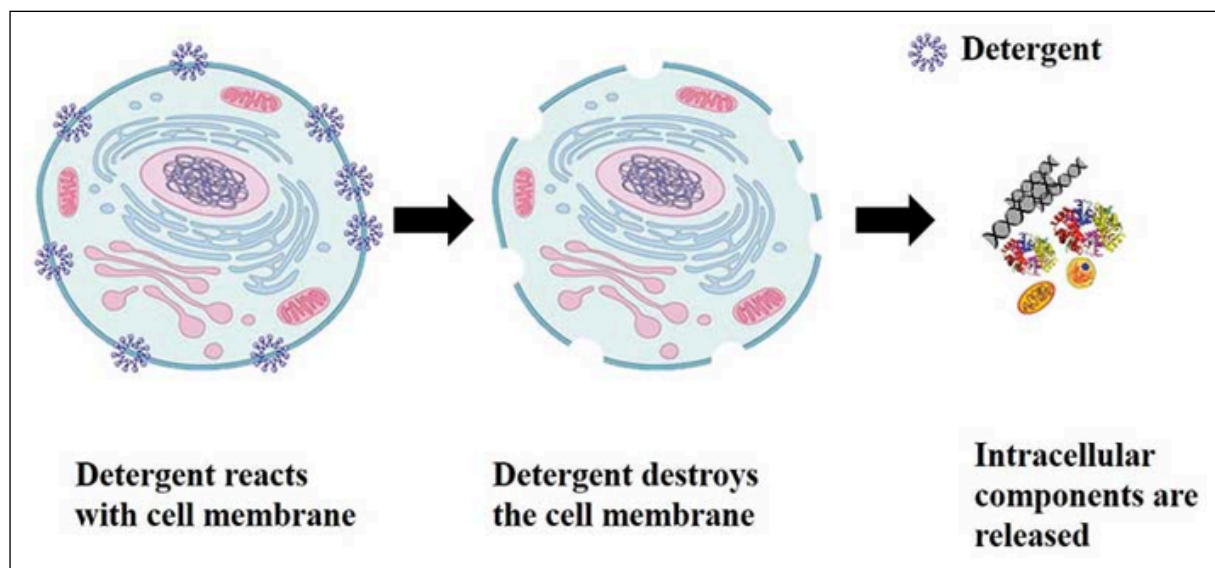


Abbildung 4: Zell-Lyse unter Verwendung eines Detergens zum Öffnen der Zellmembran und Freisetzen der intrazellulären Bestandteile. (A Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate, o. J.)

Um an die DNA im Inneren der Zellen zu kommen, müssen diese aufgebrochen werden (Abbildung 4). Je nach Probenotyp wird unterschiedlich vorgegangen:

Schweineleber:

1. Leberstück auf einer Petrischale abwägen (siehe Tabelle 3) und mit Mixstab pürieren.
2. Gewebe in Lysis-Puffer überführen und **Proteinase K** zugeben.
3. 1–2 h bei 56 °C im Wasserbad inkubieren, bis das Gewebe vollständig aufgelöst ist.
4. **Qualitätskontrolle:** Homogenes, klares Lysat ohne sichtbare Gewebereste.

Bakterien (E. coli):

1. 1,5 ml Bakterienkultur abzentrifugieren (10 min, 10.000 × g), Überstand vorsichtig entfernen.
2. Bakterienpellet in Lysis-Puffer resuspendieren, **Lysozym** und **EDTA** zugeben.
3. 30 min bei 37 °C inkubieren, um die gramnegative Zellwand anzugreifen.
4. **Qualitätskontrolle:** Pellet vollständig aufgelöst; bei zu wenig Ausgangsmaterial ist die DNA-Ausbeute stark reduziert.

5.3 Reinigung

Mittels mehrstufiger Extraktion mit organischen Lösungsmitteln werden Proteine und Lipide entfernt:

1. **Phenol-Extraktion:** Lysat mit gleichem Volumen Phenol (pH 8,0) vermischen, 2 min schütteln, 5 min zentrifugieren ($10.000 \times g$). Wässrigen Überstand (obere Phase) übernehmen.
2. **Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1):** Wiederholung der Phasentrennung zur weiteren Proteinentfernung.
3. **Chloroform-Extraktion:** Entfernung restlicher Phenol-Rückstände.
4. **Qualitätskontrolle:** Saubere Trennung in wässrige Phase, Interphase (denaturierte Proteine) und organische Phase. In Abbildung 5 sammeln sich die Proteine in der Interphase.

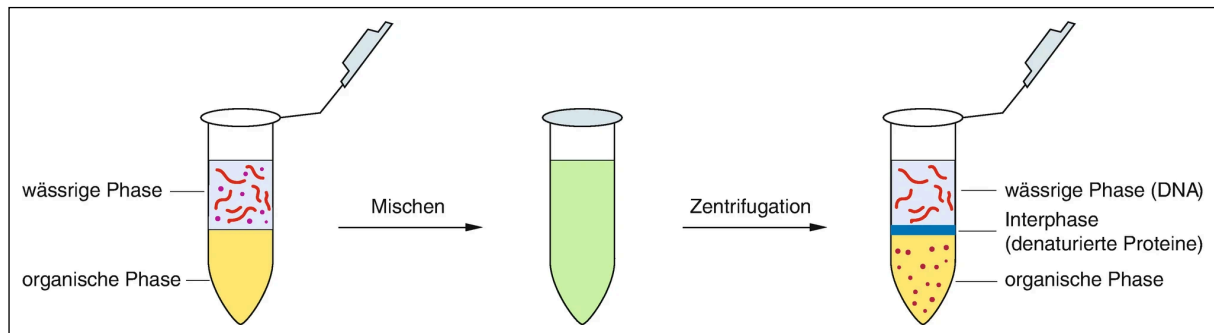


Abbildung 5: Phasentrennung bei der Phenol-Chloroform-Extraktion: wässrige Phase (DNA), Interphase (Proteine), organische Phase. (Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren, 2021)

5.4 Isolierung durch Fällung

1. Zum wässrigen Überstand 1/10 Volumen 3 M Natriumacetat (pH 5,2) und 2–2,5 Volumen 100 % Ethanol zugeben.
2. 30 min bei $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ oder 10 min bei Raumtemperatur ausfällen lassen.
3. 15 min zentrifugieren ($10.000 \times g$, $4\text{ }^{\circ}\text{C}$). Das DNA-Pellet sollte als weißer/ durchsichtiger Niederschlag am Boden sichtbar sein.
4. Überstand entfernen, Pellet mit 70 % Ethanol waschen, erneut zentrifugieren.
5. Pellet bei Raumtemperatur trocknen und in **TE-Puffer** aufnehmen (Abbildung 6 zeigt das Prinzip der Fällung in Isopropanol).

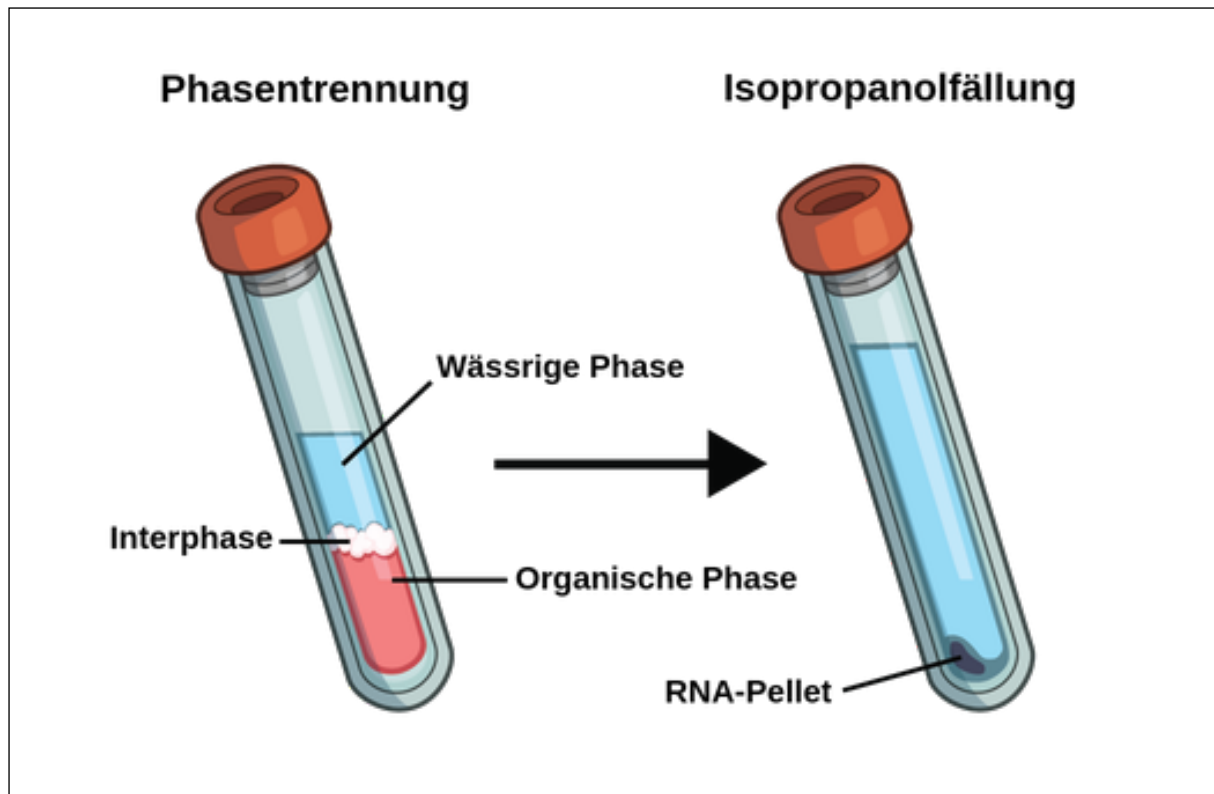


Abbildung 6: Fällung von Nukleinsäuren: Das Pellet sammelt sich nach Zentrifugation am Boden des Gefäßes (schematisch für Isopropanol-Fällung dargestellt). (Phenol-Chloroform-Extraktion, o. J.)

5.5 Hinzugabe von RNase

Die gewonnene DNA wird in zwei Aliquots aufgeteilt:

- **+RNase:** Mit RNase A behandelte DNA (Inkubation 30 min bei 37 °C).
- **-RNase:** Unbehandelte Kontrollprobe.

In den weiterführenden Schritten wird, sofern nicht anders angegeben, die **+RNase**-Probe verwendet.

5.6 Photometermessung

1. Extrahierte DNA (**+RNase** und **-RNase**) im Verhältnis 1:100 in destilliertem Wasser verdünnen.
2. Messung der Absorption bei 230 nm, 260 nm und 280 nm in 1-cm-Küvetten.
3. Destilliertes Wasser als Null-Referenz verwenden.
4. Konzentration nach Gleichung 2 und Reinheitsquotienten nach Gleichung 3 und Gleichung 4 berechnen.

Abbildung 8 und Abbildung 7 zeigen beispielhafte Spektren. Die Bakterienproben wurden ein zweites Mal gemessen (2. Durchlauf), da die ersten Messwerte nicht plausibel waren.

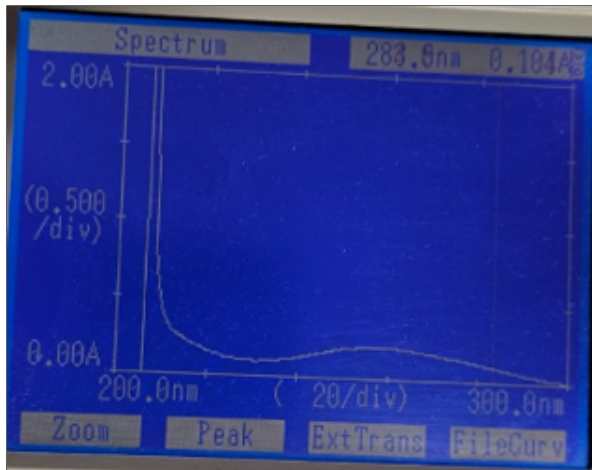


Abbildung 7: UV-Spektrum einer Leberprobe - *RNase* (Absorption *E* bei 230, 260 und 280 nm).

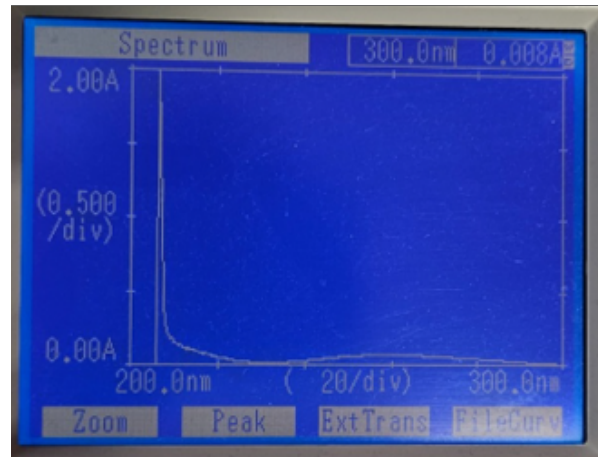


Abbildung 8: UV-Spektrum einer Leberprobe +*RNase* (Absorption *E* bei 230, 260 und 280 nm).

5.7 Restriktionsenzym-Verdau

Die DNA wird mit den in Tabelle 4 aufgeführten Restriktionsenzymen behandelt. Für jedes Enzym wird der entsprechende Standardpuffer verwendet (Tabelle 5).

1. Reaktionsansatz: DNA, Restriktionsenzym, 10× Reaktionspuffer, Wasser auf Endvolumen bringen.
2. Inkubation 1–2 h bei 37 °C im Wasserbad.
3. Reaktion durch Erhitzen auf 65 °C für 20 min (je nach Enzym) oder direkte Verwendung im Gel stoppen.

5.8 Gelelektrophorese

1. 0,8–1,0 % Agarosegel in TAE/TBE-Puffer gießen, mit Ethidiumbromid anfärben.
2. DNA-Proben mit Ladepuffer anmischen und zusammen mit **GeneRuler 1 kb Plus** Marker laden.
3. Elektrophorese bei ca. 5–8 V/cm für 45–60 min.
4. Dokumentation unter UV-Licht.

Es wurden folgende Probenkombinationen untersucht:

1. **Leber:** -*RNase*, +*RNase* (unrestriktiert)
2. **Bakterien:** -*RNase*, +*RNase* (unrestriktiert)
3. **Leber:** +*RNase* mit Restriktionsenzymen (EcoRI, NaeI, PstI)

6 Ergebnisse

Die Ergebnisse sind nach Probengruppe (Leber, Bakterien) und quantitativer Auswertung gegliedert. Jeder Teilabschnitt folgt dem Muster Darstellung → Erläuterung → Interpretation → Schlussfolgerung.

6.1 Leberproben

6.1.1 Isolierung und Photometrie

Leber (1. Durchlauf)		
	+RNase	-RNase
LS	Konz.: 1385 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.4 E_{260}/E_{230} : 1.8	Konz.: 1380 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.4 E_{260}/E_{230} : 1.7
TP	Konz.: 3910 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.4 E_{260}/E_{230} : 1.4	Konz.: 1365 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.3 E_{260}/E_{230} : 1.4
NS	Konz.: 1055 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.7 E_{260}/E_{230} : 2	Konz.: 370 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.6 E_{260}/E_{230} : 3.7
SS	Konz.: 1060 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.6 E_{260}/E_{230} : 1.6	Konz.: 2040 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.5 E_{260}/E_{230} : 1.4
SG	Konz.: 3280 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.5 E_{260}/E_{230} : 1.4	Konz.: 2980 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.6 E_{260}/E_{230} : 1.6

Tabelle 6: Photometrische Einzelmesswerte der Leberproben (1. Durchlauf). Konzentration [µg DNA/ml], Reinheitsquotienten [-].

Erläuterung

Tabelle 6 listet die nach Gleichung 2 berechneten Konzentrationen sowie die Reinheitsquotienten aller Leberproben. Die Konzentrationen liegen zwischen ca. 10 und 400 µg DNA/ml. Die Absorptionsquotienten E_{260}/E_{280} und E_{260}/E_{230} weichen bei den meisten Proben deutlich von den Referenzwerten in Tabelle 2 ab.

Interpretation

Im Vergleich zum Referenzwert von $E_{260}/E_{280} \approx 1.8$ sind fast alle Proben verunreinigt. Die Probe NS +RNase weist mit $E_{260}/E_{280} = 1.7$ und $E_{260}/E_{230} = 2.0$ die geringsten Abweichungen auf und nähert sich den Idealwerten am ehesten. Die hohen Konzentrationen bei TP und SG deuten auf erfolgreiche Extraktion, aber gleichzeitig auf Protein- oder Phenol-Kontamination hin (niedrige E_{260}/E_{280} -Werte).

Schlussfolgerung

Die Leber-Extraktion lieferte in allen Fällen nachweisbare DNA in relevanten Konzentrationen. Die Reinheit ist jedoch durchweg suboptimal; nur die Probe NS erfüllt die Referenzwerte

annähernd. Das Ziel der Konzentrationsbestimmung wurde erreicht, das Ziel einer hochreinen DNA nur teilweise.

6.1.2 RNase-Nachweis

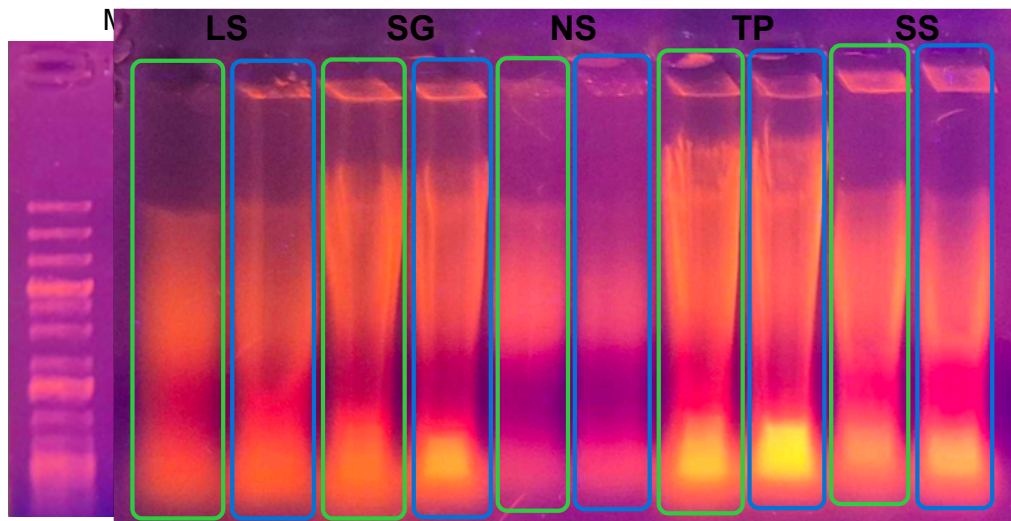


Abbildung 9: Gelelektrophorese unrestringierter Leber-DNA: -RNase (□) und +RNase (□). Marker: GeneRuler 1 kb Plus [kbp].

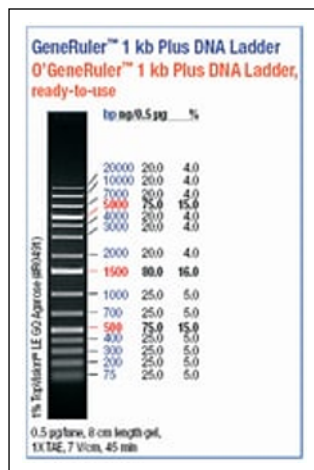


Abbildung 10: DNA-Ladder GeneRuler™ 1 kb Plus. Bandengrößen in kbp.

Erläuterung

Abbildung 9 zeigt die erfolgreich extrahierte Hochmolekular-DNA als breite Band am oberen Gelrand (>20 kbp). Der mittlere Schmier (ca. 1–40 kbp) stammt aus zerrissener DNA und RNA. Die helle Wolke am unteren Rand deutet auf RNA-Kontamination hin; bei SG, TP und SS ist nach RNase-Behandlung eine Abnahme erkennbar.

Interpretation

Der Schmier macht den hohen RNA-Anteil in Leberzellen sichtbar (geschätzt 85 %). Der RNase-Effekt ist gelbildlich bei einzelnen Proben nachweisbar. Photometrisch ist kein konsistenter Konzentrationsrückgang bei +RNase erkennbar (Tabelle 6).

Schlussfolgerung

Der RNA-Nachweis und -Abbau gelang im Gel teilweise. Das Ziel wurde nur bei einem Teil der Proben klar erreicht.

6.1.3 Restriktionsverdau

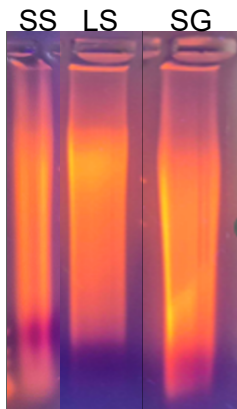


Abbildung 11: Gelelektrophorese von mit Restriktionsenzymen verdauter Leber-DNA (+*RNase*). Proben SS (*EcoRI*), LS (*PstI*), SG (*NaeI*).

Erläuterung

In Abbildung 11 verschwindet die Hochmolekular-Bande und es entsteht ein durchgehender Schmierstreifen von ca. 20 kbp bis wenige hundert bp. Die LS-Probe (*PstI*) zeigt einen verkürzten Schmier.

Interpretation

Der erfolgreiche Verdau bestätigt enzymatisch verwertbare DNA trotz photometrisch nachgewiesener Verunreinigungen. Der partielle Verdau bei LS (*PstI*) kann auf Enzym- oder Reaktionsprobleme zurückzuführen sein.

Schlussfolgerung

Das Ziel des Restriktionsverdaus wurde bei zwei von drei Proben vollständig und bei LS teilweise erreicht.

6.2 Bakterienproben

6.2.1 Isolierung und Photometrie

Bakterien (2. Durchlauf)		
	+RNase	-RNase
CB	Konz.: 200 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.9 E_{260}/E_{230} : 6.7	Konz.: 200 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.9 E_{260}/E_{230} : 6.7
AL	Konz.: 65 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 0.9 E_{260}/E_{230} : 3.3	Konz.: 200 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.9 E_{260}/E_{230} : 6.7
IZ	Konz.: 125 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.3 E_{260}/E_{230} : 1.7	Konz.: 150 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 0.9 E_{260}/E_{230} : 1.4
EL	Konz.: 0 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 0 E_{260}/E_{230} : 0	Konz.: -10 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : -0.5 E_{260}/E_{230} : 0.2
LH	Konz.: 460 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.6 E_{260}/E_{230} : 0.9	Konz.: 480 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.7 E_{260}/E_{230} : 1

Tabelle 7: Photometrische Einzelmesswerte der Bakterienproben (2. Durchlauf). Konzentration [µg DNA/ml], Reinheitsquotienten [-].

Erläuterung

Die Bakterienproben wurden nach unplausiblen Erstmessungen erneut bestimmt. Die Konzentrationen liegen deutlich unter den Leberwerten.

Interpretation

Niedrige Konzentrationen und ungünstige Reinheitsquotienten deuten auf unvollständige Lyse und geringe Ausbeute hin.

Schlussfolgerung

Die bakterielle DNA-Isolierung war photometrisch nur schwach nachweisbar. Das Isolierungsziel wurde nicht erreicht.

6.2.2 RNase und Restriktion

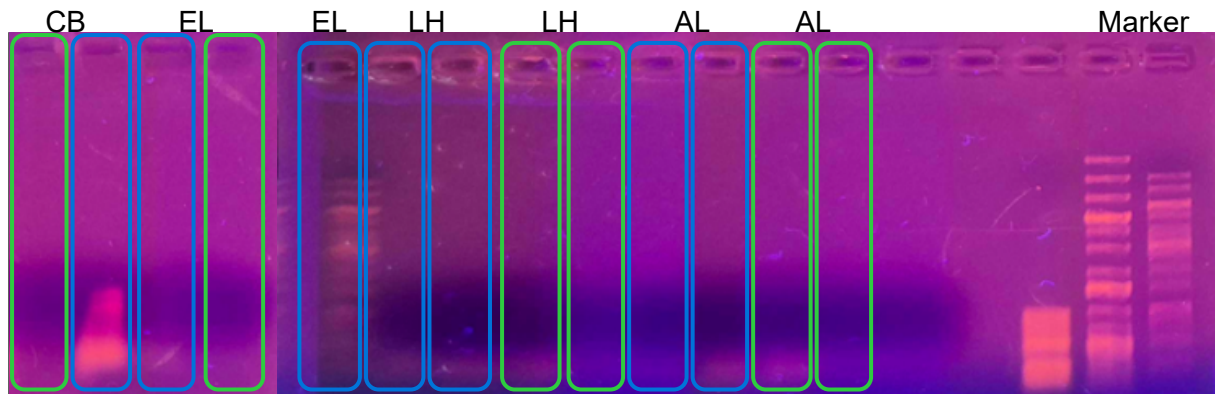


Abbildung 12: Gelelektrophorese unrestrictierter Bakterien-DNA: -RNase (□) und +RNase (□).

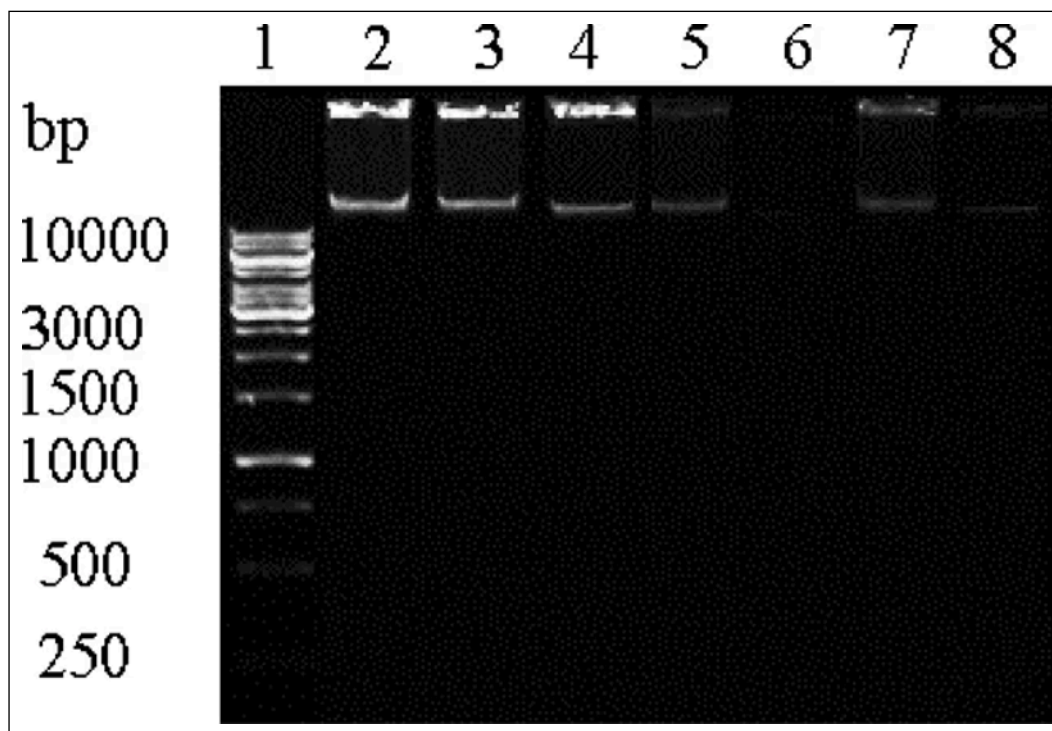


Abbildung 13: Erwartetes Gelelektrophorese-Bild unrestrictierter Bakterien-DNA (Literatur). (See Lang Tay, 2014)

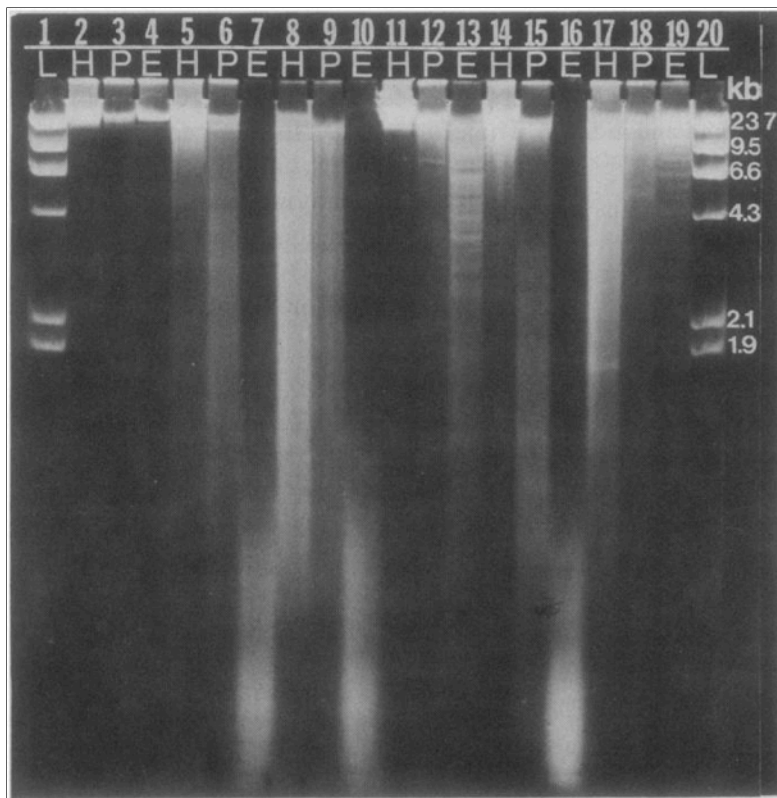


Abbildung 14: Erwartetes Gelelektrophorese-Bild restr.-verdauter Bakterien-DNA (Literatur). Spalten „E“ = *E. coli*. (Melanie Ehrlich, 1981)

Erläuterung

In Abbildung 12 fehlt die erwartete Hochmolekular-Bande am Gelanfang. Es ist nahezu kein Fluoreszenzsignal erkennbar. Abbildung 13 und Abbildung 14 zeigen die Soll-Befunde aus der Literatur.

Interpretation

Die fehlende Bande deutet auf eine fehlgeschlagene bakterielle Extraktion hin (Lyse, zu wenig Ausgangsmaterial). Ein RNase-Vergleich ist aufgrund der geringen Signalintensität nicht möglich. Restriktions-Gele konnten nicht ausgewertet werden.

Schlussfolgerung

Weder RNase-Nachweis noch Restriktionsanalyse waren bei Bakterien aussagekräftig. Die Ziele wurden nicht erreicht.

6.3 Quantitative Auswertung

6.3.1 Statistische Auswertung

	Leber (1. Durchlauf)		Bakterien (2. Durchlauf)	
	+ RNase	- RNase	+ RNase	- RNase
Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$]	2138 ± 1355.2 $\mu\text{g DNA/ml}$	1627 ± 963.2 $\mu\text{g DNA/ml}$	170 ± 178.2 $\mu\text{g DNA/ml}$	204 ± 176.7 $\mu\text{g DNA/ml}$
$E_{260}/E_{280} \approx \sim 1.8$	1.5 ± 0.1	1.5 ± 0.1	1.2 ± 0.7	1.2 ± 1
$E_{260}/E_{230} \approx 2.0 - 2.2$	1.6 ± 0.3	2 ± 1	2.5 ± 2.6	3.2 ± 3.2

Tabelle 8: Beschreibende Statistik: Mittelwert $\pm$ Standardabweichung. Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$], Reinheitsquotienten [-].

Leider lässt sich aus den Daten in Tabelle 8 keine Gesamtausbeute in mg DNA/g Leber berechnen, da das Endvolumen der Aufnahme fehlt. Die Tabelle zeigt einen Trend, der auch durch Abbildung 15, Abbildung 16 und Abbildung 17 verdeutlicht wird: Die DNA-Konzentration in Leberproben ist deutlich höher als in Bakterienproben.

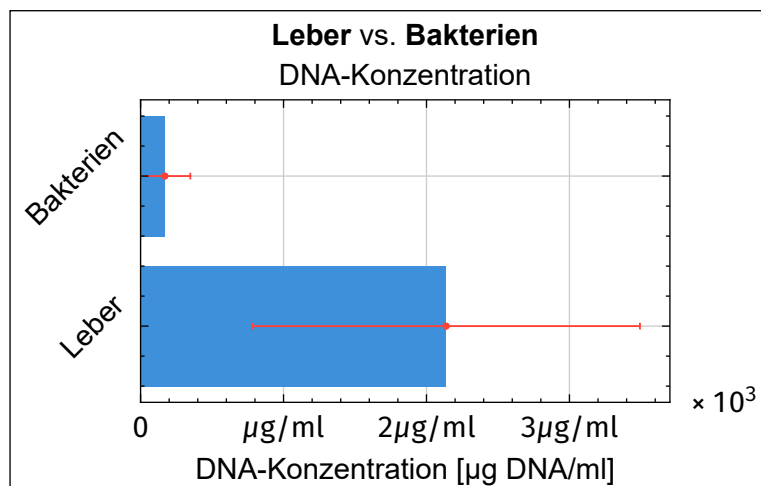


Abbildung 15: Horizontalbalkendiagramm: mittlere DNA-Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$, +RNase] von Leber- und Bakterienproben mit Standardabweichung.

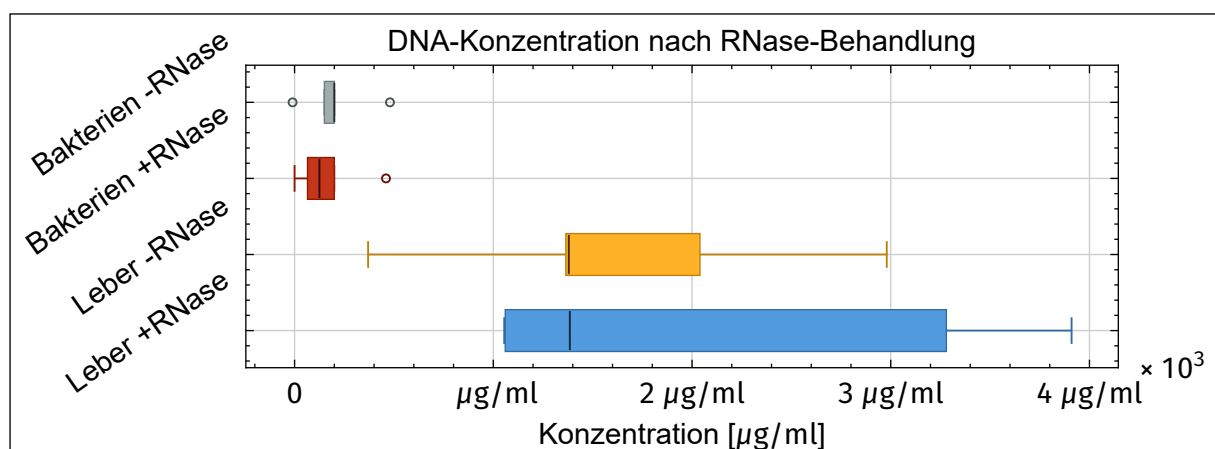


Abbildung 16: Boxplot der DNA-Konzentrationen [$\mu\text{g DNA/ml}$] für +RNase- und -RNase-Proben je Probengruppe.

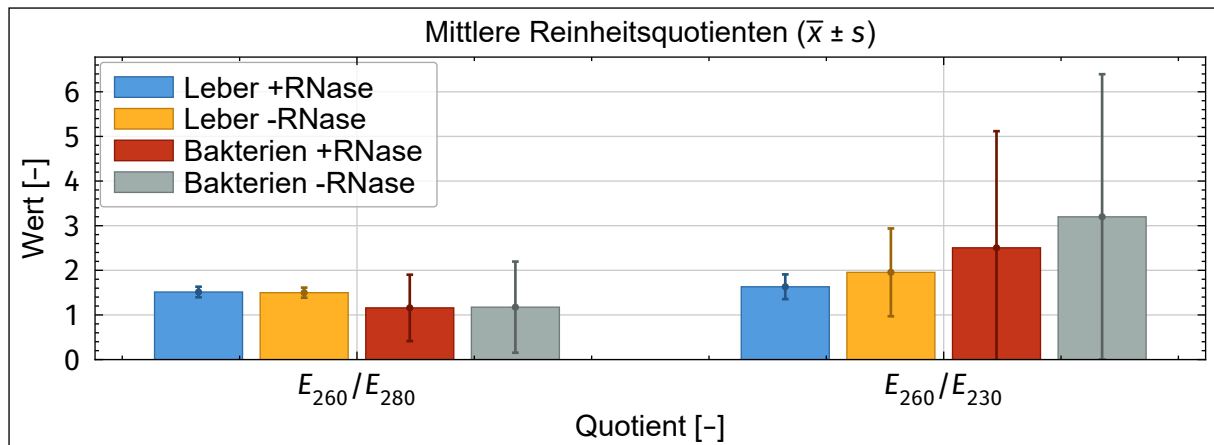


Abbildung 17: Gruppierendes Balkendiagramm der mittleren Reinheitsquotienten E_{260}/E_{280} und E_{260}/E_{230} [-] mit Standardabweichung.

Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, kann schon ein leicht suboptimales Verhältnis E_{260}/E_{280} oder E_{260}/E_{230} auf starke Verunreinigung hindeuten. Interessanterweise ist bei RNase-behandelten Proben der Mittelwert der DNA-Konzentration höher als bei unbehandelten Proben — entgegen der Erwartung, dass RNA-Abbau die gemessene Nukleinsäure-Menge senkt.

Schlussfolgerung

Die deskriptive Statistik bestätigt den qualitativen Befund: Leber-DNA in hohen Konzentrationen, aber meist verunreinigt; Bakterien-DNA kaum nachweisbar. Eine RNase-bedingte Konzentrationsänderung ist im Mittel nicht erkennbar.

6.3.2 Hypothesentests

Verwendete Testformeln

Für den Zusammenhang zwischen Lebergewicht und DNA-Konzentration wird der Pearson-Korrelationskoeffizient verwendet:

$$(5) \quad r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Bei kleinen Stichproben ($n < 30$) werden nicht-parametrische Tests eingesetzt. Der **Wilcoxon-Rang-Summen-Test** vergleicht zwei unabhängige Gruppen; die Teststatistik W ist die kleinere Summe der Ränge einer der Gruppen. Der **Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test** vergleicht gepaarte Messwerte; W ist die kleinere Summe der Ränge der positiven oder negativen Differenzen.

Entscheidungsregel (beide Tests, $\alpha = 0.05$): Liegt W oberhalb des tabellierten kritischen Wertes, wird die Nullhypothese (*kein Unterschied*) nicht verworfen.

Sämtliche Hypothesentests werden mit einem Signifikanzniveau von $\alpha = 0.05$ durchgeführt. Die kritischen Werte werden aus standardisierten Tabellen entnommen.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Gewicht der Leberprobe und der DNA-Konzentration im fertigen Isolat?

Abbildung 18 zeigt mit einem Korrelationskoeffizienten von -0.05 keinen deutlichen Zusammenhang.

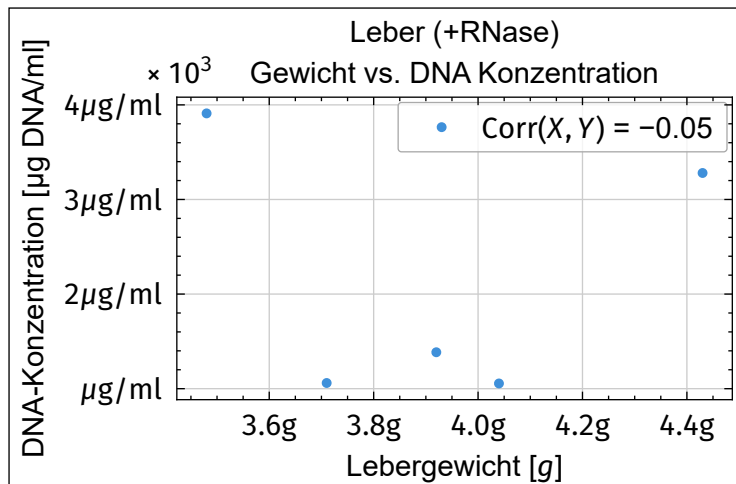


Abbildung 18: Streudiagramm: Lebergewicht [g] vs. DNA-Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$, +RNase]. Pearson- $r = -0.05$.

Gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen der DNA-Konzentration in Leber- und Bakterienproben?

Aufgrund der niedrigen Anzahl an Proben wird zur Beantwortung ein Wilcoxon-Rang-Summen-Test durchgeführt. Dieser liefert eine Teststatistik von **15** $\sim W_{5,5}$, der aber nicht unterhalb des kritischen Wertes von **2** liegt und daher **nicht signifikant** ist.

Gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen der DNA-Konzentration in -RNase- und +RNase-Proben?

Aufgrund der niedrigen Anzahl an Proben wird zur Beantwortung ein Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test durchgeführt. Dieser liefert eine Teststatistik von **24** $\sim W_{10}$, der aber nicht unterhalb des kritischen Wertes von **8** liegt und daher **nicht signifikant** ist.

Schlussfolgerung

Keiner der durchgeführten Hypothesentests ergab signifikante Unterschiede. Dies ist vor allem auf den geringen Stichprobenumfang ($n = 5-10$) zurückzuführen.

7 Diskussion

7.1 Gesamtinterpretation

Die Ergebnisse der genomischen DNA-Isolation zeigen ein deutliches Zweiteilungsbild: Die Extraktion aus Schweineleber gelang grundsätzlich, während die bakterielle Isolierung aus *E. coli* weitgehend fehlschlug.

Leberproben: Photometrisch wurde DNA in allen Proben nachgewiesen (Abschnitt 6.1.1), jedoch mit überwiegend ungünstigen Reinheitsquotienten. Im Agarosegel war Hochmolekular-DNA sichtbar (Abschnitt 6.1.2); RNase reduzierte die RNA-Kontamination bei einzelnen Proben. Der Restriktionsverdau bestätigte die enzymatische Verwertbarkeit der DNA (Abschnitt 6.1.3).

Bakterienproben: Weder Gel noch Photometrie lieferten überzeugende Ergebnisse (Abschnitt 6.2.1, Abschnitt 6.2.2). Die Soll-Befunde aus der Literatur (Abbildung 13, Abbildung 14) konnten nicht reproduziert werden.

Befund	Erwartung (Soll)	Beobachtung (Ist)	Wahrscheinliche Ursache
Leber-Gel unrestrictiert	Band >20 kbp	Band + RNA-Wolke	RNA-reiches Gewebe, teils erfolgreiche Isolierung
Leber RNase	weniger RNA-Signal	teilweise sichtbar	RNase wirkt, aber unvollständig
Leber Restriktion	Schmier	Schmier; LS kürzer	Verdau ok; PstI-Teilverdau bei LS
Bakterien-Gel	Band oben	kaum Signal	Lyse/Extraktion fehlgeschlagen
RNase-Konzentration	+RNase < -RNase	+RNase höher im Mittel	Verunreinigungen; kleines n ; RNA in E_{260}
Statistik	—	nicht signifikant	Stichprobe zu klein ($n = 5-10$)

Tabelle 9: Soll-Ist-Vergleich der zentralen Versuchsbefunde.

Gesamtbewertung der Zielsetzung:

1. Isolierung Leber: **erreicht** (DNA nachweisbar, Gel positiv)
2. Isolierung Bakterien: **nicht erreicht**
3. RNase-Nachweis: **teilweise erreicht** (Leber ja, Bakterien nein)
4. Konzentrationsbestimmung: **erreicht** (Leber), **nicht erreicht** (Bakterien)
5. Restriktionsverdau: **erreicht** (Leber), **nicht auswertbar** (Bakterien)

Das Studentenlabor eignet sich gut, um die Prinzipien der Phenol-Chloroform-Extraktion, Photometrie und Gelelektrophorese zu erlernen. Für quantitative oder klinische Anwendungen wären standardisierte Kits und größere Stichproben erforderlich.

7.2 Fehlerquellen

7.2.1 Probenvorbereitung

- **Zu wenig Bakterienpellet:** Durch unzureichendes Abzentrifugieren der Kultur war das Ausgangsmaterial zu gering, was die fehlende DNA-Ausbeute erklärt (Abschnitt 6.2.1).
- **Gewichtsschwankungen der Leberproben:** Die eingesetzten Massen lagen zwischen 3,5 und 4,4 g (Tabelle 3); ein Zusammenhang zur Konzentration war statistisch nicht nachweisbar ($r \approx -0.05$).

7.2.2 Lyse und Extraktion

- **Gramnegative Zellwand:** Lysozym allein reichte offenbar nicht aus, die LPS-haltige Außenmembran von *E. coli* zu durchbrechen (Abschnitt 6.2.2).
- **Unvollständige Gewebehomogenisierung:** Grobe Gewebefragmente können die Proteinase-K-Lyse verzögern.

7.2.3 Reinigung und Aufreinigung

- **Phenol-Carryover:** Senkt E_{260}/E_{230} und hemmt Enzyme; erklärt die photometrisch nachgewiesenen Verunreinigungen bei Leberproben.
- **Mechanische DNA-Schädigung:** Vorschnelles Pipettieren erzeugt den mittleren Schmier im Gel (Abschnitt 6.1.2).

7.2.4 RNase-Behandlung und Photometrie

- **Unvollständiger RNA-Abbau:** RNase wurde erst nach der Extraktion zugesetzt; RNA kann bereits in E_{260} einfließen.
- **Falsche Verdünnung oder Küvettenfehler:** Erklärt die Notwendigkeit der zweiten Bakterienmessung.

7.2.5 Restriktionsverdau und Gelelektrophorese

- **Partieller Verdau (LS, PstI):** Mögliche Ursachen: abgelaufenes Enzym, falscher Puffer oder inhibitorische Verunreinigungen.
- **Probe verwechselt oder überladen:** Erklärt anomale Bakterien-Gelspuren.

7.2.6 Statistik

- **Zu kleine Stichprobe:** Mit $n = 5$ (Leber) bzw. $n = 5$ (Bakterien) ist die Teststärke zu gering, um moderate Effekte nachzuweisen (Abschnitt 6.3.2).
- **Ausreißer:** Einzelne Proben (z. B. TP, SG) mit extrem hohen Konzentrationen verzerren Mittelwert und Standardabweichung.

Anhang

Rohdaten und Versuchsangabe

Die Versuchsangabe und Messdaten sind als eingebettete Anhänge im PDF verfügbar.

Quellen

- A *Brief Overview and History of Gel Electrophoresis*. (o. J.). Abgerufen 14. Juni 2026, von <https://www.thermofisher.com/at/en/home/life-science/cloning/cloning-learning-center/invitrogen-school-of-molecular-biology/na-electrophoresis-education/na-separation-overview.html>
- A *Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate*. (o. J.). [Graphic]. ResearchGate. Abgerufen 31. Mai 2026, von https://www.researchgate.net/figure/Cell-lysis-using-detergent-to-open-the-cell-membrane-and-release-the-intracellular_fig1_314718923
- Brian Matlock. (2015). *Assessment of Nucleic Acid Purity*. <https://documents.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/Product-Bulletins/TN52646-E-0215M-NucleicAcid.pdf>
- Bruce Alberts. (2015). *Molecular Biology of the Cell* (6. Aufl.) [Bioscience]. <https://doi.org/10.1201/9781315735368>
- Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes*. (o. J.). Abgerufen 14. Juni 2026, von <https://www.neb.com/en/tools-and-resources/feature-articles/everything-you-ever-wanted-to-know-about-type-ii-restriction-enzymes>
- Gelelektrophorese*. (o. J.). Studyflix. Abgerufen 31. Mai 2026, von <https://studyflix.de/biologie/gelelektrophorese-2584>
- Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Angelika Amon, Hidde Ploegh, Anthony Bretscher, Monty Krieger, & Kelsey C. Martin. (2016). *Molecular Cell Biology* (8. Aufl.). https://books.google.at/books/about/Molecular_Cell_Biology.html?id=Ov7LvQEACAAJ
- Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren*. (2021). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-61707-6_30
- Martin Armbrrecht. (2013). *Protein-Proben durch photometrische Messungen* (S. 2). https://www.eppendorf.com/product-media/doc/de/59828/Eppendorf_Detection_Application-Note_279_BioPhotometer-D30_Detection-contamination-DNA-protein-samples-photometric-measurements.pdf
- Melanie Ehrlich. (1981). *5-Methylcytosine in Eukaryotic DNA - Scientific Figure on ResearchGate* [Graphic]. ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Agarose-gel-electrophoresis-of-DNA-digested-with-restriction-endonucleases-DNA-2-VLg_fig1_16933196
- Michael R. Green, & Joseph Sambrook. (2018). Isolation and Quantification of DNA [Biology]. In Michael R. Green & Joseph Sambrook, *Molecular Cloning*. <https://doi.org/10.1101/pdb.top093336>
- Michael T. Madigan, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, W. Matthew Sattley, & David A. Stahl. (2020). *Brock Mikrobiologie* (15. Aufl.).

Molar extinction coefficient - Wikipedia. (o. J.). Abgerufen 29. Dezember 2025, von https://en.wikipedia.org/wiki/Molar_absorption_coefficient

Phenol-Chloroform-Extraktion. (o. J.). Labster Theory Pages. Abgerufen 31. Mai 2026, von https://theory.labster.com/de/dna_isolation/

Restriction enzyme (CC BY-NC-SA 2.0). (2016). [Graphic]. flickr. <https://www.flickr.com/photos/yourgenome/26915997776>

See Lang Tay. (2014). *Polymer antimicrobial coatings with embedded fine Cu and Cu salt particles* - Scientific Figure on ResearchGate [Graphic]. ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Agarose-gel-electrophoresis-of-purified-E-coli-DNA-lane-1-is-1kb-GeneRuler-ladder-lane_fig3_261408592

Thomas J. Silhavy, Daniel Kahne, & Suzanne Walker. (2010). *The Bacterial Cell Envelope*. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a000414>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Spektrum von Nukleinsäuren und üblichen Verunreinigungen. (Martin Armbrrecht, 2013)	5
Abbildung 2	Bandenmuster bei der Gelelektrophorese. (Gelelektrophorese, o. J.)	7
Abbildung 3	DNA kann mit molekularen „Scheren“, den Restriktionsenzymen, an definierten Stellen zerschnitten werden. Orange markiert ist die Stelle, welche von genau diesem Restriktionsenzym (es hat den Namen EcoRI) erkannt wird. (<i>Restriction enzyme</i> (CC BY-NC-SA 2.0), 2016)	8
Abbildung 4	Zell-Lyse unter Verwendung eines Detergens zum Öffnen der Zellmembran und Freisetzen der intrazellulären Bestandteile. (<i>A Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods</i> - Scientific Figure on ResearchGate, o. J.)	12
Abbildung 5	Phasentrennung bei der Phenol-Chloroform-Extraktion: wässrige Phase (DNA), Interphase (Proteine), organische Phase. (<i>Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren</i> , 2021)	13
Abbildung 6	Fällung von Nukleinsäuren: Das Pellet sammelt sich nach Zentrifugation am Boden des Gefäßes (schematisch für Isopropanol-Fällung dargestellt). (<i>Phenol-Chloroform-Extraktion</i> , o. J.)	14
Abbildung 7	UV-Spektrum einer Leberprobe -RNase (Absorption <i>E</i> bei 230, 260 und 280 nm).	15
Abbildung 8	UV-Spektrum einer Leberprobe +RNase (Absorption <i>E</i> bei 230, 260 und 280 nm).	15
Abbildung 9	Gelelektrophorese unrestrictierter Leber-DNA: -RNase (□) und +RNase (□). Marker: GeneRuler 1 kb Plus [kbp].	17
Abbildung 10	DNA-Ladder GeneRuler™ 1 kb Plus. Bandengrößen in kbp.	17
Abbildung 11	Gelelektrophorese von mit Restriktionsenzymen verdauter Leber-DNA (+RNase). Proben SS (EcoRI), LS (PstI), SG (NaeI).	18
Abbildung 12	Gelelektrophorese unrestrictierter Bakterien-DNA: -RNase (□) und +RNase (□).	20
Abbildung 13	Erwartetes Gelelektrophorese-Bild unrestrictierter Bakterien-DNA (Literatur). (See Lang Tay, 2014)	20

Abbildung 14	Erwartetes Gelelektrophorese-Bild restr.-verdauter Bakterien-DNA (Literatur). Spalten „E“ = E. coli . (Melanie Ehrlich, 1981)	21
Abbildung 15	Horizontalbalkendiagramm: mittlere DNA-Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$, +RNase] von Leber- und Bakterienproben mit Standardabweichung.	22
Abbildung 16	Boxplot der DNA-Konzentrationen [$\mu\text{g DNA/ml}$] für +RNase- und -RNase- Proben je Probengruppe.	22
Abbildung 17	Gruppierte Balkendiagramme der mittleren Reinheitsquotienten E_{260}/E_{280} und E_{260}/E_{230} [-] mit Standardabweichung.	23
Abbildung 18	Streudiagramm: Lebergewicht [g] vs. DNA-Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$, +RNase]. Pearson- $r = -0.05$.	24

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Extinktionskoeffizienten (ϵ) von dsDNA, Proteinen und Phenol bei den für die Reinheitsbeurteilung relevanten Wellenlängen. (Brian Matlock, 2015)	6
Tabelle 2	Zusammenfassung der für die Beurteilung der Versuchsergebnisse herangezogenen Referenzwerte.	6
Tabelle 3	Gewichte der verwendeten Leberproben vor der Extraktion [g].	10
Tabelle 4	Bekannte Zuteilung der Proben zu den Restriktionsenzymen. L = Leber, B = Bakterien.	11
Tabelle 5	Erkennungssequenzen der verwendeten Restriktionsenzyme: EcoRI, NaeI, PstI. Bildquelle: https://www.neb.com/	11
Tabelle 6	Photometrische Einzelmesswerte der Leberproben (1. Durchlauf). Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$], Reinheitsquotienten [-].	16
Tabelle 7	Photometrische Einzelmesswerte der Bakterienproben (2. Durchlauf). Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$], Reinheitsquotienten [-].	19
Tabelle 8	Beschreibende Statistik: Mittelwert $\pm$ Standardabweichung. Konzentration [μg DNA/ml], Reinheitsquotienten [-].	22
Tabelle 9	Soll-Ist-Vergleich der zentralen Versuchsbefunde.	25